



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch



**ACHTUNG**  
Lesen Sie die Warnhinweise



Medizinprodukt, Klasse IIa

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf

## 1. Verwendungszweck und Anwendungshinweise

Disco-Click ist ein Elektrostimulator nach dem Mückenstich, der durch die Freisetze von elektrischen Mikroimpulsen, lokale Symptome – Juckreiz und Entzündung – lindern kann, die durch Mückenstiche verursacht werden, und insbesondere dazu bestimmt ist den Juckreiz aufgrund Mückenstichen zu reduzieren, Verringerung der Schwellung (Entzündung) durch Mückenstiche, Reduzieren Sie die Folgen von Mückenstichen, indem Sie den Drang zum Kratzen stoppen.

## 2. Wie es funktioniert:

Disco-Click arbeitet mit Piezoelektrizität. Wenn der Aktivierungsknopf des Geräts gedrückt wird, wird eine winzige statische Ladung erzeugt. Auf eine gestochene Stelle aufgetragen hilft es, Juckreiz und Schwellungen zu reduzieren und verhindert, dass Sie sich kratzen, was eine Ursache für Infektionen sein kann.

Für die Funktion sind KEINE Batterien erforderlich.

## 3. Gebrauchsanweisung:

- halten Sie Disco-Click zwischen Zeige- und Mittelfinger;
- Bringen Sie die Spitze des Geräts direkt in Kontakt mit der gestochenen Stelle;
- Drücken Sie mit dem Daumen auf die Aktivierungstaste (siehe Abbildung), um den Impuls freizugeben;
- wie im Abs. 3.1 angegeben wiederholen.

**Bei jedem Impuls ist ein leichtes Kribbeln zu spüren.** Dieses Gefühl kann je nach individuell Empfindlichkeit variieren und kann bei Kindern relevanter sein. **Die wohltuende Wirkung ist in der Regel innerhalb weniger Minuten nach der Anwendung spürbar.**

**Verwenden Sie für beste Ergebnisse Disco-Click so bald wie möglich nach dem Stich** oder sobald Sie den Drang zum Kratzen verspüren und die Schwellung sehen können. Befestigen Sie Disco-Click an Ihrem Schlüsselbund und tragen Sie ihn immer bei sich.

### 3.1 Anzahl der Impulse („Klicks“)

#### Erwachsene und Jugendliche:


- Wenden Sie 5 bis 10 Impulse („Klicks“) an, indem Sie das Gerät so um den Stich bewegen, dass der gesamte gestochene Bereich behandelt wird.
- Wenn Sie 10 Minuten nach der ersten Anwendung immer noch Juckreiz verspüren, können Sie weitere 5 bis 10 Klicks anwenden.
- Bei empfindlicheren oder allergischeren Personen oder zur Reduzierung von Schwellungen können weitere Anwendungen erforderlich sein: In diesem Fall können erneut zusätzliche Klicks gemäß Absatz 3.2 angewendet werden. Wenden Sie jedoch nicht mehr als 10 Klicks gleichzeitig an.

#### Kinder:

- Wenden Sie zuerst 5 Klicks an und bewegen Sie das Gerät so um den Stich herum, dass der gesamte gestochene Bereich behandelt wird.
- Wenn Ihr Kind 10 Minuten nach der ersten Anwendung immer noch Juckreiz verspürt oder wenn Sie feststellen, dass es sich kratzen muss, können Sie weitere 5 Klicks anwenden. Zusätzliche Anwendungen wurden nicht klinisch getestet.

### 3.2 Häufigkeit der Verabreichung

Warten Sie nach der ersten Anwendung mindestens 10 Minuten, um das Gerät erneut an derselben Stelle zu verwenden.

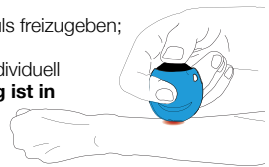

## 4. SICHERHEITSINFORMATION

### 4.1 KONTRAINDIKATIONEN

- VERWENDE NICHT:
  - bei Patienten, die einen Herzschrittmacher, einen implantierten Defibrillator oder ein anderes implantiertes metallisches oder elektronisches Gerät tragen;



- bei Patienten, bei denen eine Herzerkrankung oder Epilepsie diagnostiziert wurde;
- bei schwangeren Frauen;
- bei Kindern unter 6 Monaten.

#### 4.2 WARNHINWEISE

##### VERWENDE NICHT:

- auf offenen Wunden oder Hautausschlägen oder über infizierten oder pathologischen oder anormalen Hautzuständen, auf blutenden oder sezernierenden (nässenden) Stellen und auf Schleimhäuten;
- in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen oder wenn Sie ein Insektenschutzmittel und/oder brennbare Substanzen (z. B. Parfüm, Deodorant usw.) verwendet haben, da dieses Gerät brennbare Substanzen entzünden kann;
- mit nassen Händen oder auf nasser Haut.

#### 4.3 VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Nicht verwenden/mit Vorsicht verwenden:
  - auf oder um empfindliche Bereiche wie Mund, Zunge, Augen, Ohren, innere Teile der Handgelenke oder Handflächen, Fingerspitzen usw.;
  - wenn Sie empfindlich auf elektrische Reize reagieren.
- NUR ZUM PERSÖNLICHEN GEBRAUCH WIRD EMPFOHLEN: Verwenden Sie das Gerät nur an einem einzigen Patienten. Um die Übertragung von Infektionen zu vermeiden, nicht bei mehr als einem Patienten anwenden.
- Nur zur äußerlichen Anwendung.
- Wenn dieses Gerät nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet wird, kann es an der Anwendungsstelle zu Empfindlichkeit oder Reizung kommen. Beenden Sie die Anwendung, wenn Reizungen auftreten.
- Disco-Click ist ein Medizinprodukt. Verwenden Sie es nicht als Spielzeug.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern oder Personen mit eingeschränkten sensomotorischen Fähigkeiten auf. Kleinteile können verschluckt oder eingeatmet werden.


#### 4.4 ACHTUNG

- Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Gerät auftritt, sollte dem Hersteller (info@tecnimed.eu) und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden.

### 5. Reinigung und Instandhaltung

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, feuchten Tuch und wickeln Sie sie möglicherweise mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Tuch ein und trocken Sie sie gründlich ab. Sollte Wasser in das Gerät eindringen, stellen Sie sicher, dass es vor Gebrauch vollständig trocken ist.

### 6. Technische Merkmale

- Dauer der Einzelentladung: 0,01 ms
- Entladespannung: ca. 13 kV (ohne Last)
- Leistung: piezoelektrisch
- IP-Schutzgrad: IP22
- Erwartete Lebensdauer des Gerätes: ca. 20/25.000 Entladungen.
- Anwendungsteil Typ BF 

### 7. Entsorgung



Bitte entsorgen Sie dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer verantwortungsvoll gemäß den geltenden Gesetzen.

Patents no. EP2089102(B1), US8712555, US9474899(B2), AU2007320897B2 and other international patents pending.

Klinisch getestet



Auf der Seite des Geräts (die ersten zwei Ziffern geben das Produktionsjahr an, die dritte und vierte Ziffer die Produktionswoche)

KEIN VERFÄLLIGUNGSDATUM



UDI-Code, gekennzeichnet auf dem Gerät.



Medizinprodukt, Klasse IIa



modell 05200 - Disco-Click



Hergestellt in Italien von Tecnimed srl  
12, P.le Cocchi – 21040 Veduggio O. (VA)  
www.tecnimed.com – info@tecnimed.eu

9/EDP-2024-04