



Lire attentivement les instructions



ATTENTION: lire les précautions d'emploi

Stocker ces instructions.

1. UTILISATION ATTENDUE ET INDICATION D'UTILISATION

ECOSAVE est un électrostimulateur après piqûre qui, par la libération des micro-impulsions électriques, peut soulager les symptômes locaux - douleur, brûlure, rougeur, gonflement - causée par des piqûres et/ou des morsures d'insectes et d'autres animaux, tels que:

- iménoptoria (par exemple, abeilles, guêpes, frelons, etc.),
- arachnides (par exemple "scorpions, araignées, etc.),
- animaux marins (poisson, méduses, corail urticant),
- serpents.

2. SPÉCIFICATIONS D'UTILISATION

ECOSAVE est un moyen DE PREMIÈRE INTERVENTION et NE REMPLACE PAS LA CONSULTATION D'UN MÉDECIN.


Vous pouvez utiliser Ecosave en attente d'un médecin ou aller dans un centre hospitalier.

ATTENTION: l'appareil n'est pas destiné à être utilisé contre des réactions allergiques dans des personnes allergiques. En cas d'allergie, suivez strictement les indications du spécialiste.

3. QU'EST-CE QUE C'EST ET COMMENT ÇA MARCHE

Ecosave est un stimulateur électronique de taille et poids très limités qui, par deux électrodes, émet de courtes décharges électriques, d'une durée d'environ 10 microsecondes et avec des pauses régulières d'une seconde.

Fig. 1

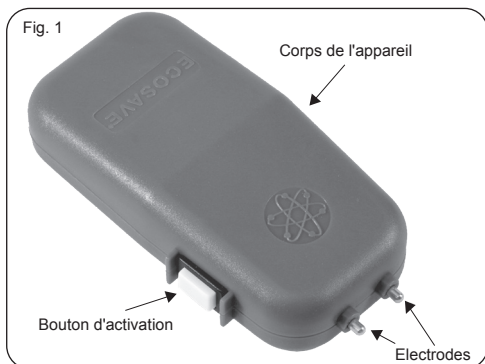

3.1 Situation d'utilisation

ECOSAVE peut faire partie du budget de premiers secours que chaque randonneur, naturaliste, exploitant forestier ou environnemental, agriculteur, apiculteur, jardinier et chaque supervision de la chasse et pêche apporte avec lui, avec la masse la plus basse.

Les chasseurs peuvent également utiliser l'appareil sur les chiens en cas de morsure de vipère qui, assez fréquemment, entraîne la mort de l'animal atteint.

4. INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ

4.1 CONTRE-INDICATIONS:

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les situations suivantes:

- sur des sujets ayant un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou d'autres appareils métalliques ou électroniques implantés;
- sur des sujets ayant des problèmes cardiaques ou épileptiques;



- sur les femmes enceintes;
- sur les enfants de moins de 6 ans.

4.2 AVERTISSEMENTS

NE PAS UTILISER:

- sur des plaies ouvertes ou sur la peau pas intègre ou avec des conditions d'infection, sur les zones de saignements et sur des muqueuses;
- sur le cou ou la poitrine;
- dans des zones sensibles telles que la bouche, les yeux, les oreilles et en général sur la tête ou le visage, l'intérieur des poignets, les paumes, les doigts, etc.
- sur les personnes particulièrement sensibles à la stimulation électrique;
- à proximité de substances inflammables liquides ou gazeuses ou après avoir appliqué des substances insectes-répulsives ou inflammables (telles que des parfums ou des déodorants) parce que l'appareil pourrait éclairer une flamme;
- avec des mains mouillées ou une peau humide.

4.3 PRÉCAUTIONS

- L'utilisation strictement personnelle du produit est recommandée: l'appareil est destiné à une utilisation individuelle. Afin de ne pas promouvoir une éventuelle transmission d'infections, elle ne doit pas être utilisée sur plus de personnes.
- Uniquement pour une utilisation externe.
- Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à ces instructions, il peut rendre la partie traitée particulièrement sensible ou irritée. Interrompre l'utilisation en cas d'irritation.
- Ecosave est un dispositif médical. Ne pas utiliser comme un instrument d'infraction ou de défense personnelle.
- Tenir à l'écart de la portée des enfants ou des personnes ayant une réduction du moteur ou des compétences sensorielles. Les petites pièces peuvent être ingérées ou inhalées.

4.4 ATTENTION

- ECOSAVE n'a aucune efficacité sur les poisons neurotoxiques tels que celui de certains serpents (par exemple: cobra ou mamba) et certains animaux tropicaux (certaines méduses, poissons ou autres animaux marins, insectes ou arachnides).
- L'utilisation de ECOSAVE en l'absence d'une morsure ou d'une ponction rend l'effet perçu de l'impulsion électrique supérieure à la normale.
- ATTENTION: la sécurité et l'efficacité n'ont pas été démontrées sur les nouveau-nés et les enfants.
- Tous les accidents graves pouvant survenir par rapport à l'utilisation de l'appareil doivent être communiqués au fabricant (info@tecmed.eu) et à l'autorité compétente (ministère de la Santé).

5. MODE D'APPLICATION

Ecosave émet une impulsion dont l'effet sera perçu comme l'effet d'une petite décharge électrostatique ("choc"), ce qui varie en fonction de la sensibilité individuelle et qui peut être ressentie plus par des enfants.

RAPPELEZ-VOUS:

- avant d'appuyer sur le bouton, assurez-vous que les deux électrodes sont bien supportées sur la peau;
- gardez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la première décharge soit libérée, puis relâchez-le.
- UTILISEZ DÈS QUE POSSIBLE APRÈS AVOIR REÇU LA MORSURE /LA PONCTION (idéal serait dans les 5-6 premières minutes). Procédez comme suit:


5.1 ABEILLES, GUÊPES, FRELONS, ARACHNIDES, POISSONS ET MÉDUSES

Les morsures d'imeoptoriose et d'autres animaux peuvent être très dangereuses et ne doivent pas être sous-estimées.

5.1.1 Avant d'utiliser Ecosave examine la zone touchée et supprime la piqûre, si cela est resté bloqué, ou des restes d'acules, d'épines ou de tentacules.

Si nécessaire, séchez la partie affectée avant de procéder à un traitement avec ECOSAVE (par exemple dans le cas de méduses ou de ponctions toxiques), et assurez-vous de ne pas défilé l'appareil avec des mains mouillées.

Fig. 2

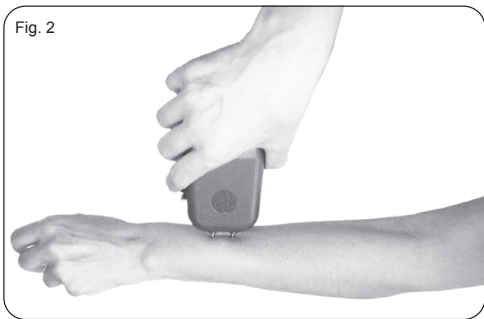

5.1.2 Comment traiter la partie affectée

- Placez une électrode de l'appareil près de la piqûre: ce sera la broche autour duquel faire pivoter le dispositif;
- assurez-vous que les deux électrodes sont bien supportées sur la peau et appliquez de 3 à 7 décharges dans une direction circulaire.
- Si nécessaire, répétez après quelques minutes.

5.1.3 Résultat attendu

Si le sujet affecté est rapidement sauvé, la stimulation électrique est capable de réduire les symptômes locaux en quelques minutes (douleur, brûlure, rougeur, gonflement).

N'oubliez pas: Ecosave est un outil d'intervention rapide. Il n'agit pas sur les effets du poison: dans le cas d'allergies aux morsures d'iménoptère ou d'autres animaux, ou si vous ne savez pas si vous êtes allergique, passez de toute urgence à un médecin ou à un centre hospitalier.

ATTENTION: Ecosave ne remplace pas les traitements spécifiques fournis aux sujets allergiques (par exemple, une immunothérapie spécifique ou une thérapie désensibilisation ou une thérapie urgente avec l'adrénaline) dans des réactions systémiques graves.

5.2 SERPENTS

Les morsures des serpents toxiques partent généralement sur la partie touchée, deux trous espacés entre environ 10 mm, causés par les dents venéneuses.

5.2.1 Comment traiter la partie affectée

- penchez les électrodes de l'appareil autour de ces trous, assurez-vous que les deux électrodes sont bien supportées sur la peau et procédez par une première décharge.

- Placez une électrode de l'appareil près de l'un des deux trous: ce sera la broche autour duquel faire pivoter le dispositif;

- assurez-vous que les deux électrodes sont bien supportées sur la peau et appliquez de 3 à 7 décharges dans une direction circulaire.

- De la même manière, répétez l'opération autour du deuxième trou, de manière à traiter entièrement toute la zone intéressée.

Si nécessaire, répétez après quelques minutes.

5.2.2 Résultat attendu

Si le sujet affecté est rapidement sauvé, la stimulation électrique est capable de réduire les symptômes locaux en quelques minutes (douleur, brûlure, rougeur, gonflement).

ATTENTION: Ecosave peut être utilisé contre des morsures de vipère, dont le poison agit localement comme agent hémocéto-toxique. L'action de Ecosave n'est pas efficace contre le poison neurotoxique qui est transmis par des fibres nerveuses, telles que celle de cobra.

Rappelez-vous: Ecosave n'agit pas sur les effets du poison autre que celui local. Utilisez Ecosave comme outil de premiers secours en attendant de rejoindre un hôpital. Il ne remplace pas la thérapie attendue fournie dans un centre hospitalier.

6. NETTOYAGE

- Retirez la pile.
- Nettoyez toutes les surfaces de l'appareil et les électrodes avec un chiffon doux imbibé d'eau et de savon
- Désinfectez toutes les surfaces de l'appareil et des électrodes avec des lingettes désinfectantes.
- Assurez-vous que l'appareil est parfaitement sec avant utilisation.
- Assurez-vous que le périphérique est désinfecté après chaque utilisation (ou de toute façon avant d'être placé).

7. COMMENT INSÉRER OU REMPLACER LA PILE

- Ouvrez le compteur de batterie.
- Retirez la batterie insérée et jetez-la dans les conteneurs appropriés.
- Entrez une nouvelle batterie de type AAA - LR03 (ministyllo), faisant attention à la position indiquée.
- Fermez le couvercle de la pile.
- **Retirez la pile si vous vous pensez de ne pas utiliser Ecosave pendant une longue période.** Vous pouvez la déconnecter et la laisser dans le compartiment.

8. MAINTENANCE

- Ne soumettez pas l'appareil à l'impact et conservez-le des sources d'eau et de chaleur. Si vous obtenez de l'eau dans l'appareil, attendez jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- Vérifiez régulièrement le fonctionnement de la pile et de l'appareil, via une décharge "vide", régulièrement ou dans tous les cas avant toute excursion ou après une possible chute de l'appareil.

9. TECHNICAL DATA

- Tension de télécharge à 500 ohms: environ 600V
- Décharge répétitive de 5 microsec. avec des pauses de 1 sec.
- Température de fonctionnement: de 0 à 40 ° C
- Alimentation: 1 batterie AAA de 1,55
- Conteneur ABS antichoc
- Dimensions: 150 x 36 x 74 mm
- Poids avec la batterie: gr 145 env.
- Degré de protection IP: IP22
- Autonomie d'une batterie alcaline: environ 1 200 décharges
- Durée de vie prévue de l'appareil: 10 ans

10. SYMBOLES que vous trouvez sur l'appareil, sur l'emballage et dans ce mode d'emploi

	Fabricant		Mode d'emploi
	Date de production (4 chiffres pour l'année et 2 chiffres pour le mois)		Lire attentivement les instructions
	Dispositif médical		ATTENTION : lire les avertissements
	Code UDI		Courant continu
	Numéro de lot		Partie appliquée type BF
	CE 0051		IP22 Protégé contre les corps solides >12,5 mm et contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
			Matériau recyclable (packaging material)

Poubelle barrée d'une croix (DEEE et piles)

Instructions d'élimination

Ce produit contient des composants électriques et électroniques et piles qui peuvent contenir des matériaux qui, si jetés avec déchets généraux, pourraient être nocifs pour l'environnement. Les résidents de l'Union européenne doivent suivre les instructions spécifiques d'élimination ou de recyclage de ce produit. Les résidents en dehors de l'Union européenne doivent éliminer ou recycler ce produit conformément aux lois ou réglementations locales applicables.

GARANTIE: l'appareil est garanti sur 24 mois contre les défauts de matériaux ou de fabrication à compter de la date d'achat. En cas de défauts, il convient de faire face au producteur avec la réception des impôts du vendeur. Contactez le fabricant avant d'envoyer le produit (info@tecnimed.eu). La garantie n'est pas étendue aux dommages causés par des batteries défectueuses ou déchargées et dans le cas de la falsification, une utilisation inappropriée ou une rupture de l'appareil.

Ecosave 01000

Il est un dispositif médical
de classe IIa

CE
0051



Produit en Italie par Tecnimed srl
12, P.le Cocchi – 21040 Veduggio O. (VA)
www.tecnimed.com – info@tecnimed.eu + 39 0332 402330

9/1000-2021-11

Code 91001/5-FR
r 06 230411