



Leggere attentamente le presenti istruzioni



**ATTENZIONE:**  
leggere le avvertenze



Zanza-Click è un dispositivo medico

Conservare le presenti istruzioni.

## 1. Uso Previsto e indicazione d'uso

Zanza-Click è un elettostimolatore dopopuntura che, tramite il rilascio di microimpulsi elettrici, è in grado di alleviare i sintomi locali - prurito e infiammazione - causati da punture di zanzare e in particolare è destinato a:

- alleviare il prurito causato da punture di zanzare,
- alleviare il gonfiore causato da punture di zanzare,
- alleviare le conseguenze delle punture di zanzare eliminando la necessità di grattarsi.

## 2. Come funziona:

Il funzionamento di Zanza-Click si basa sulla piezoelettricità: quando il pulsante di attivazione viene premuto, si genera un piccolo impulso elettrico. Se applicato all'area della puntura, l'impulso elettrico è in grado di ridurre prurito e gonfiore, e di prevenire la necessità di grattarsi, cosa che può portare a infezioni. Non richiede batterie.

## 3. Come si usa:

- tieni Zanza-Click tra l'indice e il medio;
- posiziona la punta del dispositivo a contatto con la pelle, sull'area della puntura;
- premi il pulsante di attivazione con il pollice (come in figura) per generare l'impulso;
- ripeti secondo quanto indicato al par. 3.1.


**Ad ogni impulso sarà percepita la sensazione di un piccolo pizzicore,**

che varia a seconda della sensibilità individuale e può essere avvertito maggiormente dai bambini.

**L'effetto benefico si avverterà dopo qualche minuto.**

**Per avere i migliori risultati, utilizza l'apparecchio il più presto possibile dopo la puntura** o non appena avverti il prurito o ti accorgi della puntura.

Aggancia Zanza-Click ad un mazzo di chiavi tramite l'apposito anellino, per averlo sempre a portata di mano.

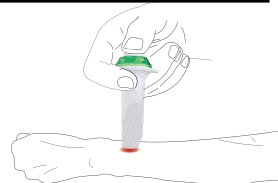

### 3.1 Quantità di impulsi ("click")

Adulti e adolescenti:

- Applica 5/10 impulsi, spostando il dispositivo tutto intorno alla puntura, in modo da trattare tutta la parte interessata.
- 10 minuti dopo la prima applicazione, se avverti ancora prurito, puoi applicare altri 5/10 impulsi.
- Nel caso di persone più sensibili o allergiche, o per ridurre il gonfiore, più applicazioni possono essere necessarie: puoi applicare quindi impulsi aggiuntivi, secondo quanto indicato al par. 3.2. In ogni caso, non applicare più di 10 impulsi alla volta.

Bambini:

- applica 5 impulsi per ridurre il prurito, spostando il dispositivo tutto intorno alla puntura, in modo da trattare tutta la parte interessata.
- 10 minuti dopo la prima applicazione, se il tuo bambino avverte ancora prurito o se noti che è portato a grattarsi, puoi applicare altri 5 impulsi. Ulteriori applicazioni non sono state clinicamente testate.

### 3.2 Frequenza di applicazione

Dopo la prima applicazione, aspetta almeno 10 minuti prima di utilizzare nuovamente il dispositivo nello stesso punto.

## 4. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



### 4.1 CONTROINDICAZIONI

NON USARE:

- su soggetti aventi un pacemaker cardiaco, un defibrillatore impiantato o altri dispositivi metallici o elettronici impiantati;
- su soggetti aventi problemi cardiaci o epilettici;

- su donne in gravidanza;
- su bambini sotto i 6 mesi.

## 4.2 AVVERTENZE

NON USARE:

- su ferite aperte o su pelle non integra o che presenta condizioni di infezione, e su zone sanguinanti e sulle mucose;
- in prossimità di sostanze infiammabili liquide o gassose o dopo l'applicazione di insetto-repellenti o di sostanze infiammabili (come profumi o deodoranti) perché l'apparecchio potrebbe accendere una fiamma.
- con mani bagnate o su pelle bagnata.

## 4.3 PRECAUZIONI:

- Non utilizzare/usare con cautela:
- su o intorno a zone sensibili come bocca, lingua, occhi, orecchie, parte interna dei polsi, palmi, dita, ecc.
- su persone particolarmente sensibili alla stimolazione elettrica;
- **SI RACCOMANDA L'USO STRETTAMENTE PERSONALE DEL PRODOTTO:** l'apparecchio è destinato all'uso individuale. Al fine di non favorire una possibile trasmissione di infezioni, non va utilizzato su più persone.
- Solo per uso esterno.
- Se il dispositivo non è usato in conformità alle presenti istruzioni, può rendere la parte trattata particolarmente sensibile o irritata. Interrompere l'uso in caso di irritazioni.
- Zanza-Click è un dispositivo medico. Non è un giocattolo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e da persone con ridotte capacità motorie o sensoriali. Piccole parti possono essere ingerite o inalate.

## 4.4 ATTENZIONE

- Eventuali incidenti gravi che dovessero verificarsi in relazione all'uso dell'apparecchio devono essere comunicati al fabbricante (info@tecnimed.eu) e all'autorità competente (Ministero della Salute).

## 5. Pulizia e manutenzione

- Pulire la superficie del dispositivo con un panno inumidito e possibilmente ripassare con un disinfettante. Lasciare asciugare adeguatamente.
- Se entra acqua nel dispositivo, assicurati che asciughi completamente prima di usarlo.

## 6. Caratteristiche tecniche

- Tensione di scarica: 13 kV (a vuoto)
- Durata dell'impulso: 0,01 ms
- Alimentazione: piezoelettrica
- Durata: 20/25.000 impulsi circa
- Grado di protezione IP: IP22
- Parte applicata tipo BF



## 7. Smaltimento



Alla fine della propria vita utile, smaltire come rifiuto di apparecchiatura elettronica (RAEE).

Brevetti EP2089102(B1), US8712555, US9474899(B2), AU2007320897B2 e altri brevetti internazionali depositati

Clinicamente testato



Numero di lotto: marchiato sul dispositivo (le prime 2 cifre indicano l'anno di produzione, la terza e la quarta cifra la settimana di produzione).



Codice UDI: marchiato sul dispositivo



Modello: Zanza-Click 06000



Dispositivo medico di classe IIa



Prodotto in Italia da Tecnimed srl  
12, P.le Cocchi – 21040 Veduggio O. (VA)  
www.tecnimed.com – info@tecnimed.eu